

DAS EINZIG VARIO

IN DER EXTRAKORPORALEN
STOSSWELLENTHERAPIE (ESWT)



GEZIELTER. SCHONENDER. EFFEKTIVER.

LIKA WAVE
VARIO

MIT INNOVATIVER

VARIO  **LOGIC**
TECHNOLOGIE (VLT)

GEBÜNDELTE KOMPETENZ, DIE INNOVATIVE WELLEN SCHLÄGT ...

Seit knapp vier Jahrzehnten ist LIKAMED im medizinischen Sektor erfolgreich am Markt tätig und führend bei der Entwicklung und Herstellung von medizinischen Liegen, Betten, Tischen und Portern.

Über die enge Zusammenarbeit bei der Realisierung eines Behandlungstisches für die Lithotripsie mit einem renommierten Stoßwellengerätehersteller wurde die Vision geboren, fachspezifische Kompetenzen interdisziplinär zu bündeln und die beiderseits fundierten Erfahrungen in einem einzigartigen Produkt zusammenzuführen. Durch die Kooperation mit einem strategischen Partner für Entwicklung, Marketing und Vertrieb und dessen weitreichenden Branchenkenntnissen, wurde diese Idee schließlich zur Marktreife gebracht.

Ergebnis dieses Schaffens ist ein zukunftsweisendes, hoch energetisches radiales Stoßwellengerät, mit dem eine

gezieltere, schonendere und effektivere Schmerzbehandlung unterschiedlichster Indikationen möglich ist:

LIKAWAVE VARIO
mit
VARIO LOGIC
TECHNOLOGIE (VLT)

Fortschritt, Präzision und Qualität „Made in Germany“ sind das Resultat dieser optimal genutzten Synergien, von denen auch Sie profitieren werden. Denn ganz gleich, ob Sie bereits Erfahrung mit der hoch energetischen Stoßwellentherapie haben oder sich erst jetzt mit dieser Behandlungsform beschäftigen: LIKAWAVE VARIO wird Ihnen neue schlagkräftige Impulse für Ihre Praxis bringen.

Aber am besten überzeugen Sie sich selbst durch eine unverbindliche Probestellung.

EXTRAKORPORALE SCHMERZBEHANDLUNG UND TRIGGERPUNKT-THERAPIE

Um Wellenlängen schonender und effektiver

LIKAWAVE VARIO ist eine echte Innovation in der extrakorporalen, hoch energetischen Stoßwellentherapie. Der Nutzen für Anwender und Patienten liegt unter anderem in der einzigartigen VARIO LOGIC TECHNOLOGIE.

Aufgrund der intelligent gesteuerten Modulation von Stoßwellenintensität und Behandlungsfrequenz ist die Therapie mit der VARIO-Stoßwelle wirksamer und zugleich schonender, als dies bei vergleichbaren Techniken der Fall ist.

Durch die alternierende Energie und Frequenz, die während eines Behandlungszyklus appliziert werden, können sich die Zellen bereits während der Behandlung immer wieder regenerieren. Die Zellerstörung, die sich bei einem Dauerbeschuss durch die lineare Anwendung ergeben kann, wird dadurch vermieden.

Auch bei der Triggerpunkt-Stoßwellentherapie erzielt LIKAWAVE VARIO beste Ergebnisse, da sich Intensität, Leistung und Pulsfrequenz der VARIO-Stoßwelle einfach auf die erforderliche Indikation anpassen lassen.

INTELLIGENTE VARIATION MACHT DEN UNTERSCHIED



ARGUMENTE FÜR DIE BEHANDLUNG MIT HOCH ENERGETISCHEN STOSSWELLEN:

- Effektive, schonende und ambulante Schmerzbehandlung
- Schneller Therapieerfolg ohne OP, Spritze oder Medikament
- Weitgehend nebenwirkungsfrei und jederzeit wiederholbar
- Positive Beeinflussung der Zellregeneration, der Dichte von schmerzhaften Nervenfasern sowie der Zusammensetzung des Bindegewebes
- Gezielte Aktivierung der Selbstheilungskräfte
- Stimulation des Stoffwechsels
- Individuell nach Indikation und Schmerzempfindlichkeit des Patienten steuerbar

SCHMERZTHERAPIE MIT DER STOSSWELLE – DIE ALTERNATIVE ZUR OP

Je nach Indikation wird die Energie in Form von hoch energetischen radialen Stoßwellen gezielt in jene Körperregionen geleitet, in denen sich der Schmerz besonders bemerkbar macht. Mittels anwendungsspezifischen Applikatoren wird die Energie über die Haut auf die darunter liegenden Gewebsschichten übertragen.

Die Stoßwellentherapie mit LIKAWAVE VARIO ist jederzeit wiederholbar und kann problemlos von medizinisch geschulten Fachkräften angewandt werden. Sie ist nahezu nebenwirkungsfrei und erspart Ihren Patienten langwierige medikamentöse Behandlungen – oftmals sogar Operationen, die bisher als unvermeidlich galten.

INDIKATIONEN EXTRAKORPORALE STOSSWELLENTHERAPIE (ESWT)

- Kalkschulter (Tendinosis calcarea)
- Fußsohlenschmerz, Fersensporn
- Tennisellenbogen (Epicondylitis humeri radialis)
- Golferellenbogen (Epicondylitis humeri ulnaris)
- Achillessehnenbeschwerden, Achillodynie
- Sehnenansatzschmerzen, z. B. an der Kniescheibensehne (Patellaspitzensyndrom)
- Sehnenreizungen am Rollhügel der Hüfte usw.
- Verzögerte Knochenbruchheilung (Pseudarthrosen)
- Chronische Nacken-, Schulter- und Rückenbeschwerden



KALKSCHULTER



FERSENSPORN




TENNISELLENBOGEN




SCHIENBEINSCHMERZ

INDIKATIONEN TRIGGERPUNKT-STOSSWELLENTHERAPIE

- Verspannungen durch schmerzende Muskelknötchen (Trigger)
- Nacken- und Schulterschmerzen
- Rückenschmerzen
- Ischias- und Gesäßschmerzen

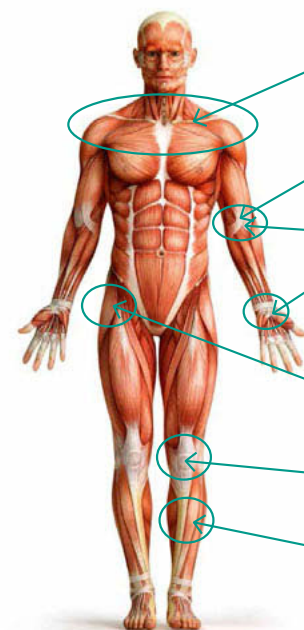

OBERE EXTREMITÄT
Schulterbehandlung:
 M.Trapezius; M.Levator scapulae; M.Rhomboideus; M.Pectoralis minor-major; M.subscapularis; M.teres minor
Epicondylitis lateralis:
 M.extensor carpi radialis brevis evt. longus
Epicondylitis medialis:
 M.flexor carpi radialis; M.flexor carpi ulnaris
Daumenrizarthrose:
 M.extensor pollicis brevis; M.extensor pollicis longus
UNTERE EXTREMITÄT
Hüfte (coxae): M.iliopsoas; M.adduktor magnus-longus; M.tensor fasciae latae; M.quadratus femoris (evt. M.gluteus)
Knie (genus): M.quartatus femoris; M.vastus lateralis; M.bizeps femoris; M.popliteus
Tibiakantensyndrom: N.tibialis anterior; M.gastrocnemius

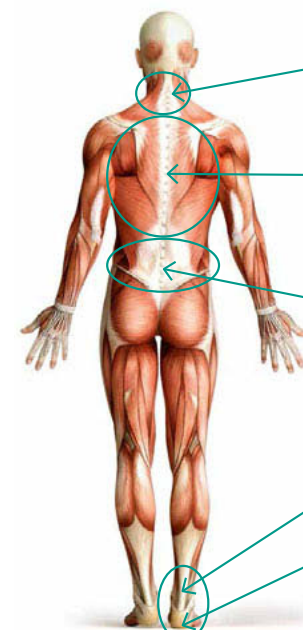

OBERE EXTREMITÄT
Halswirbelsäule:
 M.Trapezius; M.splenius capitis; M.spinalis capitis; M.semispinalis capitis; M.obliquus inferior; M.sternocleidomastoideus
Brustwirbelsäule:
 M.serratus; M.longissimus thoracis; M.Rhomboideus; M.iliocostalis lumborum (auch unter Berücksichtigung der Triggerpunkte der betroffenen Schulter)
Lendenwirbelsäule:
 M.iliopsoas; M.gluteus medius-minimus; M.piriformis; M.quadratus lumborum
UNTERE EXTREMITÄT
Fuß (carpus):
 M.gastrocnemius; M.tibialis anterior; M.soleus; M.plantaris
Achillodynie:
 M.gastrocnemius; M.soleus
Fersensporn:
 M.gastrocnemius; M.plantaris

IHRE VORTEILE IN DER PRAXIS:

- Schneller Therapiestart
- Großes Indikationsspektrum
- Jederzeit wiederholbar, da nahezu frei von Nebenwirkungen
- Hoch energetisch mit großer Eindringtiefe
- Mobil und sofort einsatzbereit
- Neue wirtschaftliche Impulse für Ihre Praxis
- Anschaffung wahlweise per Miet-, Leasing- oder Kaufoption

EINFACHE WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNUNG:

garantierte Stöße	1 500 000	= 1 000 garantierte Behandlungen
durchschn. Stöße je Behandlung	1 500	
		= 1 000 Behandlungen à X € / Behandlung
		abzgl. Anschaffungskosten
		Ihr Ertrag



Gerätewagen mit großen Rollen für optimale Bewegungswege, inkl. Halterung für das Handstück, Kabelaufwicklung, Halterung für eine Gelflasche, integrierter **Zubehörkoffer**



Abbildungen zeigen
Ausstattungsvarianten

VORTEILE DES GERÄTES:

- Einzigartige VARIO LOGIC TECHNOLOGIE
- Intuitives Bedienkonzept via 10,4-Zoll-Touchscreen
- Vorprogrammierte VARIO-Modi oder eigene Einstellungen möglich
- Verschiedene, individuell auf die Indikationen abgestimmte Applikatoren
- Ergonomisches, leichtes Handstück
- 25 Intensitätsstufen (Anpassung der Energie je nach Schmerzempfindlichkeit)
- Pulsmodus 1–12 Hz (Anpassung der Stoßwellenfrequenz je nach Indikation)
- Schneller Zugriff über leicht pflegbare Patientendatenbank
- Behandlungsvorschläge für einzelne Indikationen via medizinischem eBook mit Anwendungsbeispielen
- Modernes und anspruchsvolles Design
- Als mobile Einheit mit Gerätewagen oder kompaktes Tischgerät
- Dank Ferndiagnose-Tool per Remote-Verbindung zur schnellen und kostengünstigen Anwendungs- und Service-Unterstützung vor Ort



EINFACHE BEDIENBARKEIT ...



... ÜBER DEN 10,4 ZOLL TOUCHSCREEN ...



... FÜR DIE OPTIMALE BEHANDLUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Abmessungen	Stromversorgung
Höhe: 20 cm (inkl. Füße)	Spannungsbereich: 110–240 V
Tiefe: 30 cm	Frequenz: 50/60 Hz
Breite: 33,5 cm	Abgesichert mit: 2 St. 1A-Sicherungen
Gewicht: 10,5 kg	Anwendungsdruck: bis 6 bar
Abmessung Bildschirm: 10,4"	Impulsfrequenz: 1–12 Hz
	Intensitätsstufen: 1–25

Garantierte Schusszahl von 1,5 Mio. Stößen

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt dieser Broschüre dient lediglich der Information und ersetzt keine Gebrauchsanweisung. Trotz aller Sorgfalt kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in ihr enthaltenen Informationen und Empfehlungen keine Haftung übernommen werden. Nach Redaktionsschluss dieser Broschüre am 10.10.2013 können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Informieren Sie Ihre Patienten über die wirksame und schonende Stoßwellentherapie mit LIKAWAVE VARIO. Gerne unterstützen wir Sie mit weiterem Material wie Plakaten und Patienteninformationen.

**Sie möchten LIKAWAVE VARIO unverbindlich testen?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin.**



LIKAWAVE
VARIO

LIKAMED®

Likamed GmbH
Raußmühlstraße 7
75031 Eppingen
Deutschland

Telefon: +49 7262 9189-0
Telefax: +49 7262 9189-900

info@likamed.de
www.likamed.de

