

SEMA[®]

Fonctionnel
et compact



LIKAMED[®]



Appuis-bras en mousse intégrale

Positionnement confortable des bras permis par plusieurs points de montage. Le revêtement des appuis-bras et en mousse se caractérise par une surface souple, une grande longévité et un nettoyage particulièrement aisé.



Appuis-bras pivotants et relevables

Les appuis-bras relevables facilitent l'installation des patients par le côté. Grâce à la fonction de pivotement intégrée, ils offrent un bon confort en position assise et allongée, ainsi qu'un positionnement idéal du bras lors du traitement.



Matelas universel

La mousse sandwich bicouche convient à une utilisation universelle avec un changement constant des patients.



Roulettes de 7,5 cm de diamètre à blocage individuel

Une hauteur d'installation abaissée facilite la montée et la descente des patients et soulage le personnel de soins. Le blocage individuel de chacune des quatre roulettes permet d'immobiliser le fauteuil.



Entrée par l'avant

Entrée et sortie faciles et peu encombrantes, aussi par l'avant



Flexibilité en position assise, de confort et de Trendelenburg

Le bouton manuel permet de déclencher le réglage du dossier et de la jambièrè.

Le fauteuil est réglable de manière simple et continue de la position assise à la position de Trendelenburg en passant par la position de confort.

165 kg



Les illustrations présentent une variante d'équipement avec coussin cervical optionnels

SEMA®

Fonctionnalité en toute autonomie

La conception compacte du fauteuil-lit SEMA offre les fonctions essentielles pour une prise en charge au quotidien : un matelas de mousse sandwich bicouche, des appuis-bras souples pivotants et relevables et des roulettes directrices verrouillables.

L'installation aisée par l'avant et la commande manuelle facile d'utilisation pour un réglage en continu de la position assise à la position de Trendelenburg en passant par la position de confort assurent confort et sécurité.

Options et accessoires



Coussin cervical

Pour le soulagement des vertèbres cervicales.



Support pour rouleau de papier

Le support pour rouleau de papier non amovible permet à tout moment de disposer d'une bande de papier correctement positionnée.




Appuis-bras en mousse cunéiformes bas

Option idéale lorsqu'une légère inclinaison de la position du bras est requise tout en garantissant un confort élevé.



Appuis-bras en mousse cunéiformes hauts

De par l'inclinaison de base supérieure, cette variante permet un traitement plus confortable.

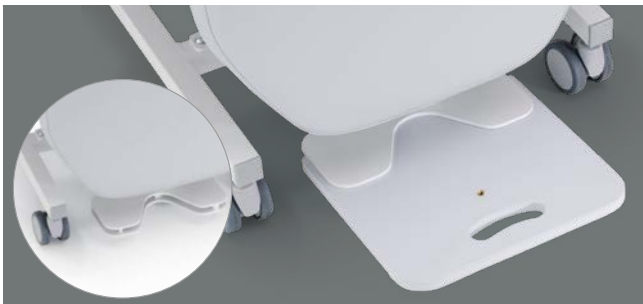

Repose-pieds

Avec palette repose-pieds amovible.



Relevage du repose-pieds avec fixation

Plus de confort pour les petits patients.

Focused on design and quality

likamed.de



Caractéristiques techniques	SEMA
Longueur x largeur x hauteur des appuis-bras	
Appuis-bras en mousse intégrale	30 cm x 12 cm x 4,4 cm
Appuis-bras en mousse cunéiformes bas	52,5 cm x 15,5 cm x 6,5 à 9,5 cm
Appuis-bras en mousse cunéiformes hauts	52,5 cm x 16,5 cm x 7,5 à 12,5 cm
Sellerie	
Longueur x largeur x hauteur	180,9 cm x 53,4 cm x 7 cm
Coloris	pierre
Revêtement	Résistant aux UV, imperméable à l'humidité, testé en terme de biocompatibilité et de toxicité, résistant à la flamme et particulièrement robuste.
Longueur totale (max.) x largeur totale (max.) x hauteur totale (max.) avec repose-pieds	191,0 cm x 81,0 cm x 128,4 cm
Garde au sol	92 mm
Hauteur du siège	59 cm
Angle d'inclinaison	
Dossier (par rapport au siège)	2° à 86°
Siège	fixe à 12°
Repose-pieds (par rapport au siège)	2° à -95°
Position de Trendelenburg (totale)	-12°
Roulettes	
blocage individuel Ø 7,5 cm	●
Réglage manuel	
Dossier avec jambière	●
Raccord d'équipotentialité	○
Câble de liaison équipotentielle	○
Pression atmosphérique autorisée	700 à 1060 hPa
Température ambiante	10 °C à 40 °C
Humidité relative de l'air	30 à 75 %
Classe de dispositif médical	I
Charge maximale	165 kg
Coloris piètement/repose-pieds	gris clair - RAL 7047
Poids (sans option)	60 kg
Garantie	2 ans

● = série ○ = option

© LiKAMED GmbH, 58-PR-127-FR 2024.04

Les informations correspondent au moment de la mise sous presse. La société LiKAMED GmbH décline toute responsabilité quant aux divergences des illustrations en termes de coloris et de forme. Sous réserve d'erreurs et de fautes typographiques. La société LiKAMED GmbH se réserve à tout moment le droit de procéder à des modifications des publications et des produits. En cas d'utilisation de la forme masculine ou du masculin générique dans la présente brochure pour des raisons de lisibilité, la forme féminine et d'autres identités sexuelles sont aussi sous-entendues.

LiKAMED®

LiKAMED GmbH
Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Allemagne
Tél. : +49 7262 9189-0 · E-mail : info@likamed.de

