

# SENSA® i Scale

Un équipement optimal  
pour le traitement




**Nouveau  
modèle  
amélioré!**

**LIKAMED®**

# SENSA® i Scale

## Fauteuil avec balance intégrée

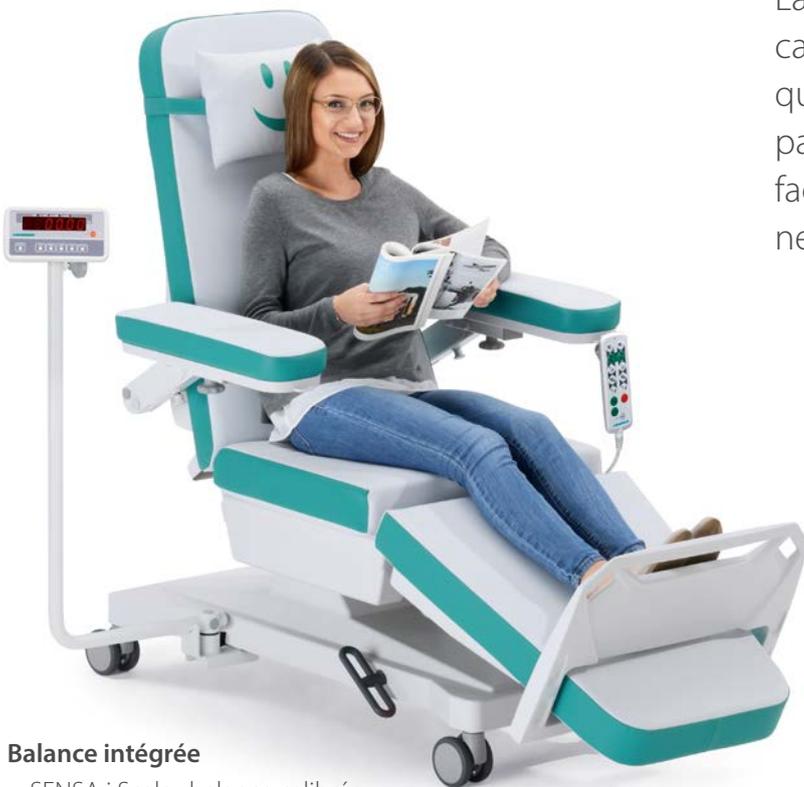

### Balance intégrée

- SENS*A* i Scale : balance calibrée
- SENS*A* i Scale+ : balance étalonnée (requis au sein de l'UE)
- 4 cellules de pesée à double appui avec jauge de contrainte (cellules de pesée C3)
- Plage de pesée : 2–200 kg (à 100 g près)
- Niveau à bulle/balance intégré(e) au châssis pour un positionnement exact

### Écran

- Avec touche de dialyse spéciale incluse
- Écran à 7 segments rétroéclairé
- Hauteur des chiffres : 20 mm
- Avec interface RS-232

Classification selon la Directive 2017/745 (MDR) :  
Im (avec fonction de mesure)



tuv-sud.com/ps-cert



Made in  
Germany

La balance calibrée ou étalonnée avec une capacité de charge maximale de 200 kg et quatre cellules de pesée permet de peser le patient dans la position qui lui convient et facilite ainsi largement le travail du personnel de santé.



### Commande aisée

Commande manuelle avec touches de confort et spéciales et fonction de verrouillage par clé magnétique.



### Équipement flexible

Configurez votre SENS*A*® i Scale

- Blocage centralisé
- Support pour mât de perfusion
- Repose-pieds motorisé
- etc.



De nombreuses  
nouvelles  
options !

[scale.configurator.likamed.de](https://scale.configurator.likamed.de)

© LIKAMED GmbH, 61-PR-1527-FR-2023.02

Les informations correspondent au moment de la mise sous presse. La société LIKAMED GmbH décline toute responsabilité quant aux divergences des illustrations en termes de coloris et de forme. Sous réserve d'erreurs et de fautes typographiques. La société LIKAMED GmbH se réserve à tout moment le droit de procéder à des modifications des publications et des produits. En cas d'utilisation de la forme masculine ou du masculin générique dans la présente brochure pour des raisons de lisibilité, la forme féminine et d'autres identités sexuelles sont aussi sous-entendues.

# LIKAMED®

LIKAMED GmbH

Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Allemagne

Tél. : +49 7262 9189-0 · E-mail : [info@likamed.de](mailto:info@likamed.de)

[likamed.de](https://likamed.de)

